

Gama de laringoscopios



Una gama superior de laringoscopios para satisfacer todas sus necesidades: calidad y rendimiento de por vida[†]

- ◆ Sistema Diamond Fibrelight
- ◆ Sistemas convencionales y de fibra óptica Premier
- ◆ Gama McCoy
- ◆ Mango ajustable
- ◆ Productos de un solo uso
- ◆ "Life-Care" u opcional **Esquema de garantía y atención al cliente "Life-Care Plus"**

Asociación para toda la vida

Laringoscopios Penlon

Siete décadas de innovación y productos de clase mundial

1943

El laringoscopio Macintosh fue un diseño revolucionario inventado por el difunto Sir Robert Macintosh, profesor de anestésicos en la Universidad de Oxford, que trabajaba con ingenieros de Penlon.

1952

Se enumeran seis hojas de laringoscopio diferentes en el catálogo de ventas de Penlon y Penlon es el primer fabricante en utilizar acero inoxidable para todas las partes de la hoja.

1972

Penlon diseñó la primera gama de laringoscopios Fibrelight del mundo.

1988

Se produjo el innovador mango ajustable Patil-Syracuse.

1993

Se presentó el primer laringoscopio de palanca del mundo, el Penlon McCoy, que proporciona una solución revolucionaria para intubaciones difíciles.

2002

Lanzamiento del laringoscopio Crystal® de un solo uso, la primera hoja de laringoscopio desechable de una pieza por Penlon



Gama de laringoscopios "Diamond"

Laringoscopios Fibrelight

ISO 7376/3 Sistema 'Verde'

Luz LED más brillante, calidad superior y rendimiento de por vida*

La gama Diamond es un sistema de laringoscopio compatible internacionalmente totalmente intercambiable que establece los estándares por los cuales todos los demás son juzgados

- ◆ Excelentes fibras ópticas y contactos de interruptor de oro, capaces de soportar tratamientos repetidos en autoclave.
- ◆ Garantía de cinco años en la guía de luz y garantía de por vida† en todas las hojas y mangos. Diseño de guía de luz extraíble: extiende la vida útil de la hoja y permite una limpieza y pulido más fáciles
- ◆ Calidad en la que puede confiar
- ◆ Acabado pulido superior: fácil de limpiar y esteriliza
- ◆ Lámpara de xenón montada en el mango para :
 - ◆ no hay problemas con los contactos eléctricos entre la hoja y el mango
 - ◆ Luz fría y brillante: no hay posibilidad de quemaduras de tejido por lámparas calientes durante intubaciones prolongadas
 - ◆ Práctica lámpara Penlon estándar de tamaño único para todos los tamaños de mangos

Aplicaciones MRI/RMN

- ◆ Solo mango estándar (más cualquier hoja)
- ◆ **Importante:** use una batería de litio de 3 voltios cubierta con papel y un espaciador no magnético para mantener la batería en su lugar
- Espacio de la batería 52083




Sets Diamond Fibrelight

Los juegos de laringoscopios Penlon brindan al médico una solución de intubación completa en un estuche protector atractivo

- | | |
|--|-------|
| Miller tamaños 2 y 3, Seward tamaño 1 y hoja estándar en un estuche | 50374 |
| • Macintosh tamaños 3 y 4, Seward tamaño 1 y hoja estándar en un estuche | 50375 |
| • Macintosh tamaños 1, 2, 3, 4 y hoja estándar en un estuche | 50376 |

Sets Configuables

Cualquier mango y hasta cinco hojas.

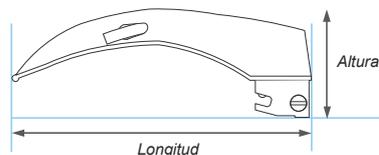

Todas las dimensiones son largo x alto (Ej.g 102 x 38 mm) Y son aproximados

Hojas

Macintosh Fibrelight®	
Size 1 Neonatal/infant	50530
96 x 46 mm	
Size 2 Ped	50531
102 x 45.5 mm	
Size 3 Adult	50532
135 x 47 mm	
Size 4 Larga	50533
152.5 x 48.5 mm	
Size 5 Extra Larga	50528
170 x 48 mm	



Miller Fibrelight	
Size 00 Prematuro	50529
67.5 x 39 mm	
Size 0 Neonato	50534
79 x 39 mm	
Size 1 Infante/Ped	50535
102 x 38 mm	
Size 2 Ped/Adulto	50536
154 x 41 mm	
Size 3 Largo	50537
195.5 x 41 mm	



Seward Fibrelight	
Size 1 Infante	50538
107 x 38 mm	
Size 2 Ped	50539
130 x 44 mm	



Robertshaw Fibrelight	
Size 0 Neonato	50540
94 x 41.5 mm	
Size 1 Infante	50541
113 x 43 mm	



Mangos

Penlight	50526
Standard	50525
Stubby	50527

Mangos Diamond

- ◆ El mango estándar es adecuado para aplicaciones MRi (use baterías adecuadas)
- ◆ El mango Penlight ofrece un equilibrio mejorado con hojas más pequeñas
- ◆ El mango Stubby está diseñado para facilitar la intubación difícil en un paciente con cuello corto o pecho en forma de barril.

Nota: Mangos con grabado antideslizante y hojas en acero inoxidable



Penlight

Standard

Stubby